

But

- Décrire la procédure et la périodicité de la vérification des lave-yeux et des douches d'urgence de l'animalerie du CRCHU de Québec-Université Laval.

Généralités

- Les lave-yeux et les douches d'urgence doivent être positionnées à tous les endroits où il existe un risque potentiel lié à l'exposition à des produits chimiques dangereux ou à une quelconque projection de substances nuisibles.
- La distance réglementaire est de 15 à 30 mètres accessible dans les 10 secondes sans obstacle.
- Le temps de rinçage doit être de **15 minutes minimum** et la température de l'eau doit être **entre 15 et 38°C**.

**Moins de 16°C
Trop froid**

**Entre 16 et 38°C
Adéquat**

**Plus de 38°C
Trop chaud**

- Les douches conçues pour rincer la tête et le corps d'une personne ne doivent pas être utilisées pour le rinçage des yeux car la pression pourrait les endommager.

Matériel

- Lave-yeux
- Douche d'urgence
- Étiquette de vérification annuelle

Responsabilités

- Le préposé aux soins des animaux est responsable d'effectuer les vérifications périodiques des lave-yeux et des douches d'urgence conformément à cette procédure et d'informer le chef d'équipe et/ou l'assistant-chef de l'animalerie de tout problème observé.
- L'assistant-chef de l'animalerie et le chef d'équipe préposé sont responsables de la formation du personnel et de l'archivage des étiquettes de vérification.

Périodicité

- Les lave-yeux sont vérifiés au minimum 1x/semaine.
- Les douches d'urgence sont vérifiées au minimum 1x/mois.

Vérification des lave-yeux

1. À l'aide du plan des emplacements des lave-yeux, effectuer une tournée afin de vérifier chaque dispositif.
2. Faire la tournée selon l'ordre d'accès de priorité ou demander de l'aide d'une personne déjà dans une salle pour effectuer la vérification.
3. La vérification doit comprendre un flush d'environ 2 à 3 minutes afin de voir à son bon fonctionnement et pour assurer une circulation minimale d'eau à l'intérieur du dispositif.
4. Toucher l'eau afin de vérifier que la température se situe entre 15° et 38°celcius.
5. Avertir l'assistant-chef de l'animalerie si une défectuosité ou un problème au niveau de la température est observée (Ex : température, pression, etc.).
6. À l'aide d'un crayon permanent, encrer la date de vérification sur le calendrier relié au dispositif et apposer vos initiales.

Vérification des douche d'urgence

1. À l'aide du plan des emplacements des douches, effectuer une tournée afin de vérifier chaque dispositif.
2. Faire la tournée selon l'ordre d'accès de priorité ou demander de l'aide d'une personne déjà dans une salle pour effectuer la vérification.
3. Utiliser un rideau et un réservoir afin de faciliter la vérification.
4. La vérification doit comprendre un flush d'environ 2 à 3 minutes afin de voir à son bon fonctionnement et pour assurer une circulation minimale d'eau à l'intérieur du dispositif.
5. Toucher l'eau afin de vérifier que la température se situe entre 15° et 38°celcius.
6. Avertir l'assistant-chef de l'animalerie si une défectuosité ou un problème au niveau de la température est observée (Ex : température, pression, etc.).
7. À l'aide d'un crayon permanent, encrer la date de vérification sur le calendrier relié au dispositif et apposer vos initiales.

Vérification des lave-yeux manuels

1. Nettoyez et examinez les bouteilles chaque semaine.
2. Changer l'eau 1 fois par semaine. Remplissez SEULEMENT la bouteille avec de l'eau propre, claire, déminéralisée ou une solution saline approuvée.
3. Afin d'empêcher toute contamination, maintenez le bec de pulvérisation couvert lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Utilisez seulement à la température ambiante. N'utilisez pas si le contenu est trouble, coloré, ou apparaît souillé de quelque façon.

Plan des emplacements

Consulter les annexe 1 à 4 pour les différents plans d'emplacement des lave-yeux et des douches d'urgence.

CHU-ENT-07

ANNEXE 1 : Plan du Bloc R (3ème étage)


Légende



Lave-Yeux




Douche d'urgence

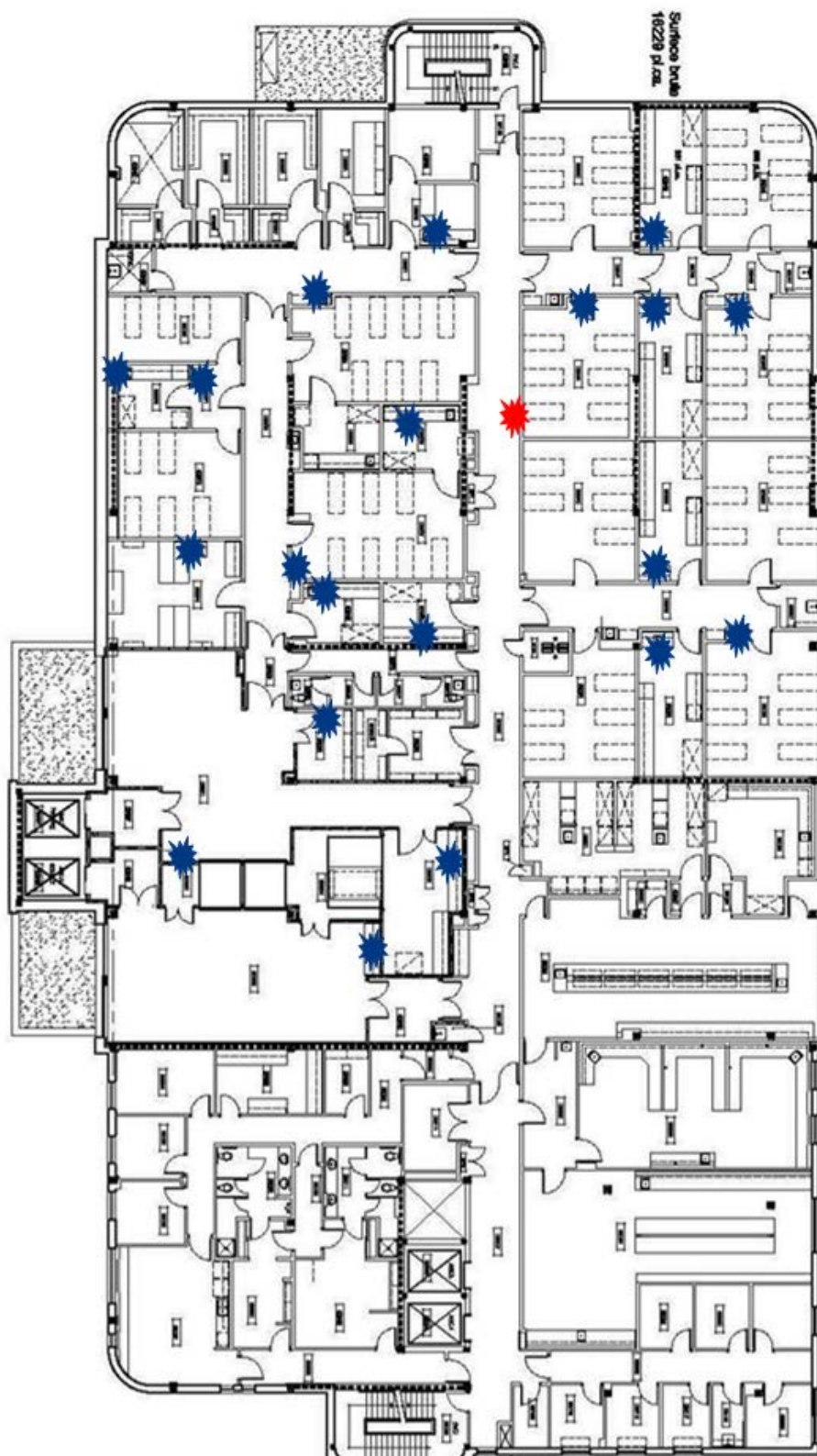

CHU-ENT-07

ANNEXE 2 : Plan du Bloc R (Sous-sol)

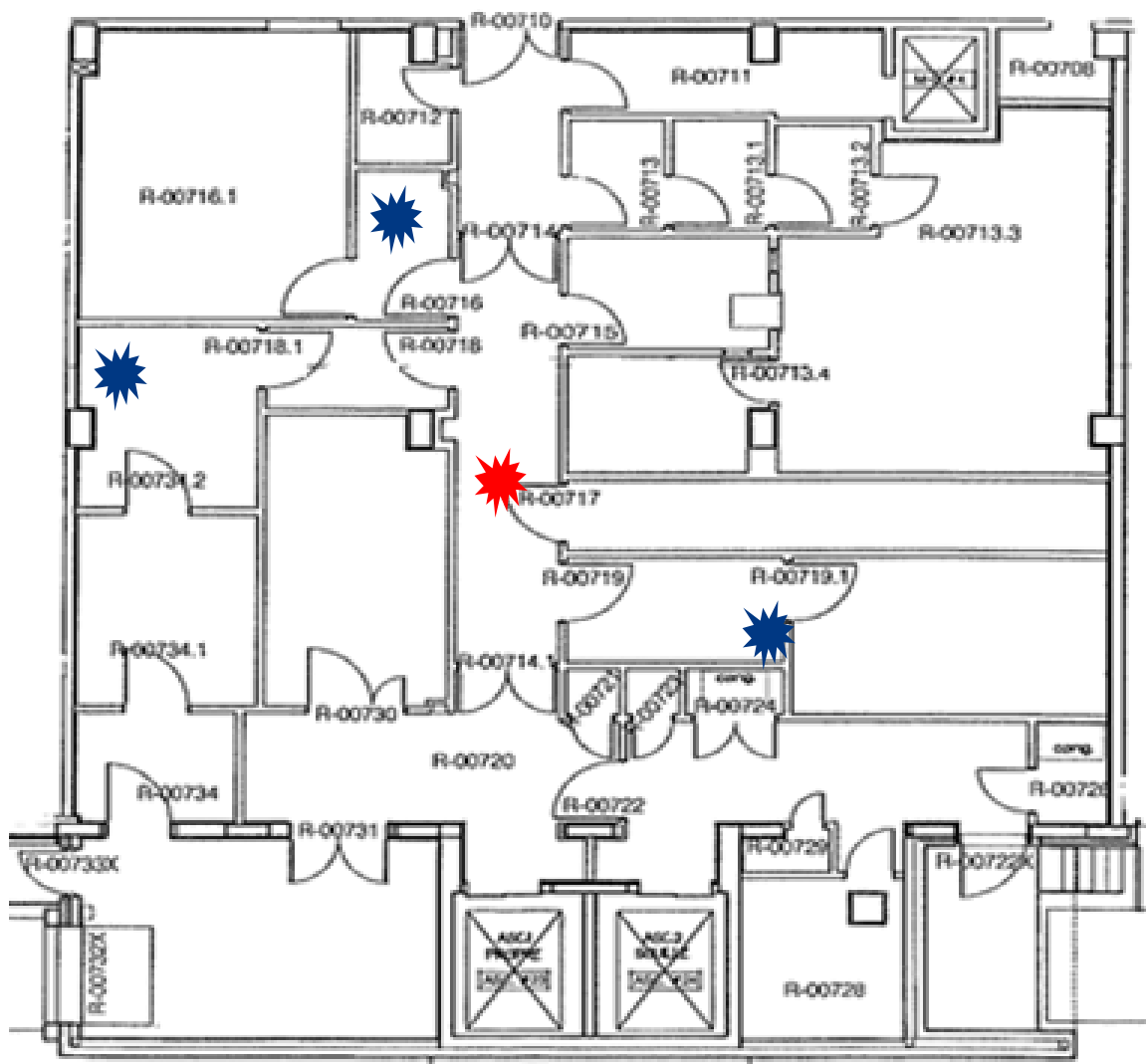

Légende

 Lave-Yeux

 Douche d'urgence

CHU-ENT-07

ANNEXE 3 : Plan du Bloc T

Légende



Lave-Yeux



Douche d'urgence



Légende



Lave-Yeux



Douche d'urgence

