

Guide d'utilisation de l'autoclave




Assurez-vous d'abord que l'appareil est en fonction. Le voyant doit être allumé.

Ensuite vous pouvez ouvrir la porte manuellement et placer ce que vous devez stériliser dans l'appareil.





Il se peut que l'écran reste noir. Il vous suffit d'appuyer sur une de ces flèches et il s'allumera.

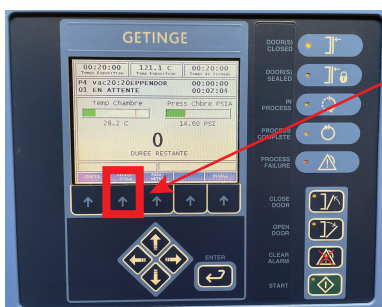


Appuyez sur la touche SELECT CYCLE.

Vous verrez apparaître les différents cycles. Appuyez sur les flèches du curseur pour sélectionner le cycle approprié.

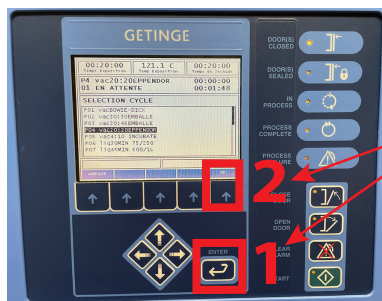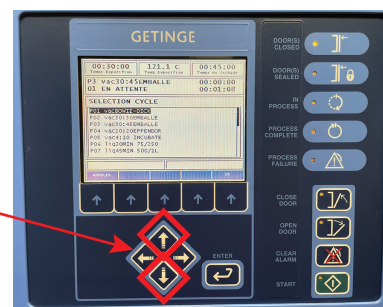

Lorsque le curseur est sur le cycle choisi, appuyez sur la touche ENTER et ensuite appuyez sur la touche OK. Vous devez le faire dans cet ordre sinon le cycle ne sera pas sélectionné.

Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche START.

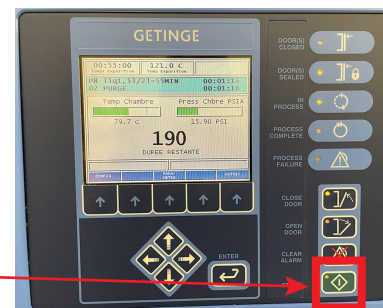

L'autoclave prendra quelques minutes pour démarrer le cycle et vous indiquera le temps requis jusqu'à la fin du processus.

Lorsque le cycle est complété, une alarme se fait entendre. Vous pouvez alors ouvrir la porte de l'autoclave et récupérer votre matériel.



Attention!

De la vapeur sortira de l'appareil lorsque vous ouvrirez la porte. Soyez prudent!

Cycle approprié selon le matériel

En général vous pouvez utiliser le cycle P3 pour le matériel **sec**.

Pour les **liquides**, vous devez tenir compte de la quantité de liquide de vos contenants.

P6 : 75ml à 250ml

P7 : 500ml à 1L

P8 : 1.5L à 2L

P9 : 4L à 5L

Liquide avec Agar : P11

En dehors de ces choix, vous devez vous adresser à la personne responsable de la stérilisation.